

CERABLATE®

easy / easy TC

Electrophysiology / RF Ablation Catheters



+++

Steuerbarer Ablationskatheter
Steerable Ablation Catheter

 **OSYPKA**
Technology for an active life

CERABLATE®

easy / easy TC

Steuerbarer HF-Ablations- und Mapping-Katheter mit integriertem Temperatursensor

Der **OSYPKA CERABLATE® easy** ist ein steuerbarer Ablationskatheter für die kardiale Hochfrequenzablation von Herzarrhythmien wie z. B.:

- AVNRT (AV-Knoten Re-entry Tachykardien)

Der **CERABLATE® easy** Katheterschaft ermöglicht im Zusammenspiel mit dem Griffelement eine Platzierung mit Wandkontakt dank der Balance von Torsion, Flexibilität und stufenloser Steuerung der Kurve.

Besondere Eigenschaften:

- Einfache Handhabung
- Stufenlose Steuerung der Kurveneinstellung
- Drehkontrolle (Torsionssteifigkeit) des Katheters
- Bogenstabilität des Katheters
- Röntgensichtbarkeit des Katheters
- Temperaturansprechverhalten
- Kompatibel mit gängigen kardialen Hochfrequenzgeneratoren

Technische Daten:

- Durchmesser 7F
- 4-polig
- Tip-Größe: 4 mm
- Pole im Abstand von 2 mm, 1-4-1 mm oder 2-5-2 mm
- Classic- oder Sigma-Bogenform
- Bogendurchmesser 30, 45 oder 60 mm
- Nutzbare Länge 80 cm oder 110 cm
- Temperatursensor: Thermistor oder Thermocouple

Steerable RF Ablation and Mapping Catheter with integrated Temperature Sensor

The **OSYPKA CERABLATE® easy** is a steerable ablation catheter for radio frequency ablation of cardiac arrhythmias, such as:

- AVNRT (AV-Node Re-entry Tachycardias)

The **CERABLATE® easy** catheter shaft combined with the handle design allows placement and tissue wall contact due to the balance between torque control, flexibility, and smooth deflection of the tip curvature.

Special Features:

- Easy to use
- Smooth movement of the curve setting
- Torque control (torsional stiffness) of the catheter
- Curve stability of the catheter
- X-ray visibility of the catheter
- Temperature response
- Compatible with commonly available radio frequency generators for cardiac arrhythmia ablation

Technical Data:


- Diameter 7F
- 4-polar
- Tip-size: 4 mm
- Pole spacing 2 mm, 1-4-1 mm or 2-5-2 mm
- Classic or Sigma curve types
- Curve diameter 30, 45 or 60 mm
- Usable length 80 cm or 110 cm
- Temperature sensor: thermistor or thermocouple




Das OSYPKA Katheterdesign

gewährleistet qualitative Produkteigenschaften dank hochwertiger Materialien und präziser Fertigung „Made in Germany“.

The OSYPKA catheter design guarantees qualitative product features thanks to high quality materials and precise manufacturing “Made in Germany”.

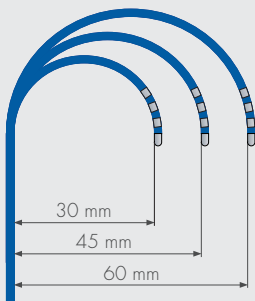

CLASSIC-Bogenform
CLASSIC curve type

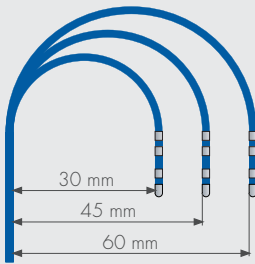

SIGMA-Bogenform
SIGMA curve type



Für eine intrakardiale Platzierung ist die Kraft zur Manipulation der Katheterspitze individuell am Kathetergriff einstellbar.

To achieve an intracardial placement, the force for manipulating the catheter tip can be individually adjusted at the catheter handle.



CERABLATE®

easy / easy TC

Bestellinformationen / Ordering information:

Varianten mit Thermistor Temperatursensor / variants with thermistor temperature sensor:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Außen-Ø Outer Ø	Polanzahl No. of poles	Polabstand Pole spacing	Bogenform Curve shape	TIP-Material TIP-material	Kurven-Ø Curve Ø	Nutzbare Länge Usable length
283083	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	30 mm	110 cm
283084	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	45 mm	110 cm
283085	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	60 mm	110 cm
283086	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	30 mm	80 cm
283087	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	45 mm	80 cm
283088	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	60 mm	80 cm
283089	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	30 mm	110 cm
283090	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	45 mm	110 cm
283091	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	60 mm	110 cm
283092	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	30 mm	80 cm
283093	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	45 mm	80 cm
283094	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	60 mm	80 cm

Passendes Zubehör / Appropriate accessories:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Länge Length	Resterilisierbar (Anzahl) Resterilizable (Number)	Anschließbare Katheter Connectable Catheters	Anschließbarer Generator Connectable generator
81942	D 369	1,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy	OSYPKA HAT300 Pin Box
81948	D 369	2,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy	OSYPKA HAT300 Pin Box
82040	TX-HAT 500-THR	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE® easy	OSYPKA HAT500® (THR)
82513	D369-EPT	0,60 m	Nein / no	CERABLATE® easy	BSc, EPT
82514	D369-CW	1,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy	Stockert, EpShuttle
82521	D369-CW	2,00 m	Nein / no	CERABLATE® easy	Stockert, EpShuttle
82523	D369-CW	3,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy	Stockert, EpShuttle
82525	D369-IBI	2,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy	SJM, T11 / Ampere

Varianten mit Thermocouple Temperatursensor / variants with thermocouple temperature sensor:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Außen-Ø Outer Ø	Polanzahl No. of poles	Polabstand Pole spacing	Bogenform Curve shape	TIP-Material TIP-material	Kurven-Ø Curve Ø	Nutzbare Länge Usable length
284080	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-5-2 mm	Classic	Platin	30 mm	110 cm
284081	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-5-2 mm	Classic	Platin	45 mm	110 cm
284082	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-5-2 mm	Classic	Platin	60 mm	110 cm
284095	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	30 mm	110 cm
284096	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	45 mm	110 cm
284097	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	60 mm	110 cm

Passendes Zubehör / Appropriate accessories:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Länge Length	Resterilisierbar (Anzahl) Resterilizable (Number)	Anschließbare Katheter Connectable Catheters	Anschließbarer Generator Connectable generator
81997	D 389	1,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy TC	OSYPKA HAT300 Pin Box
82000	D 389-CW	2,00 m	Nein / no	CERABLATE® easy TC	Stockert, EpShuttle
82001	D 389-IBI	2,00 m	Nein / no	CERABLATE® easy TC	SJM, T11 / Ampere
82040	TX-HAT 500-THR	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE® easy	OSYPKA HAT500® (THR)
82041	TX-HAT500	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE® easy TC	OSYPKA HAT500® (TC)
82042	TX-IBI	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE® easy TC	Abbott IBI T11/Ampere
82043	TX-SMARTABLATE	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE® easy TC	Stockert SMARTABLATE
82044	TX-QUBIC/EPShuttle	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE® easy TC	Stockert EPShuttle / Biotronik Qubic
82045	TX-HAT300/Atakr	2,50	Ja / yes (10)	CERABLATE® easy TC	OSYPKA HAT300/Atakr

CE 2797

Product fulfils the requirements of CE marking.

UK CA 0086

United Kingdom
Conformity Assessed



Gebrauchsanleitung beachten

Consult instructions for use

STERILE EO