

# ADELANTE®

**Permanent Pacing**



+++

Einführbesteck (Peel-Away)

*Lead Introducer Set (Peel-Away)*

 **OSYPKA**  
Technology for an active life

# ADELANTE®

## **Einführbesteck ADELANTE® (Peel-Away)**

Das **ADELANTE®** Einführbesteck aus kontrastgebendem Kunststoffmaterial dient der Venenpunktion nach Seldinger zur Einführung von Elektroden und Kathetern. Die Einführschleuse kann nach Einbringen der Sonde in zwei Hälften auseinander gezogen werden. Die Kunststoffhülse ist der French-Größe entsprechend farblich gekennzeichnet.

Das Einführbesteck besteht aus folgenden Einzelteilen:


- 1 Einführschleuse
- 1 Dilator (Länge 190 mm) mit Hülse (Länge 160 mm)
- 1 Führungsdraht (Ø 0,89 mm) mit flexibler J-Spitze (Länge 500 mm)
- 1 Punktionskanüle
- 1 Einführungshilfe zum Geradehalten des J-förmigen Führungsdrahtes
- 1 Spritze (10 ml)

## **ADELANTE® Lead Introducer Set (Peel-Away)**


*The radiopaque **ADELANTE®** introducer set is for the Seldinger venous punctation to introduce pacing leads and catheters. After introduction, the sheath can be pulled back and peeled off into two parts. The French-sizes of the sheath are color-coded.*

*Sterile Set includes:*

- 1 Introducer sheath
- 1 Dilator (length 190 mm) with sheath (length 160 mm)
- 1 Guide wire (Ø 0.89 mm) with flexible J-tip (length 500 mm)
- 1 Introducer needle
- 1 Introducer aid to straighten the j-shaped guide wire
- 1 Syringe (10 ml)

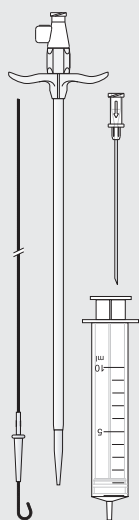

ADELANTE®

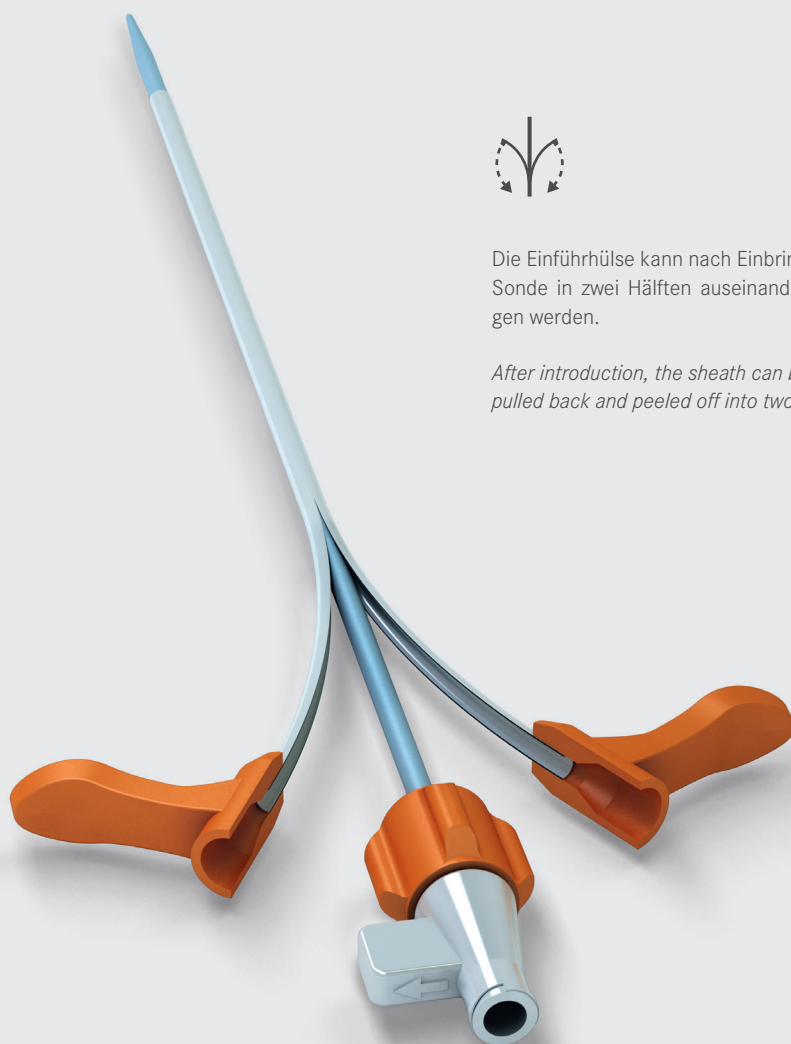

Die Einführhülse kann nach Einbringen der Sonde in zwei Hälften auseinander gezogen werden.

*After introduction, the sheath can be pulled back and peeled off into two parts.*


# ADELANTE®

## Bestellinformationen / Ordering information:

| Einzelne Einführbestecke / <i>Single introducers</i> , Mengeneinheit 5 Stück / <i>Packaging unit 5 pieces</i> |                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br><i>Article No.</i>                                                                             | Bezeichnung<br><i>Name</i>                    | French-Größe<br><i>French-size</i> |
| 52401                                                                                                         | ADELANTE® easy, Peel-away lead introducer set | 6F                                 |
| 52402                                                                                                         | ADELANTE® easy, Peel-away lead introducer set | 7F                                 |
| 52404                                                                                                         | ADELANTE® easy, Peel-away lead introducer set | 8F                                 |
| 52406                                                                                                         | ADELANTE® easy, Peel-away lead introducer set | 9F                                 |
| 52408                                                                                                         | ADELANTE® easy, Peel-away lead introducer set | 10F                                |



**Für den Einmalgebrauch bestimmt!**  
*For single use only!*

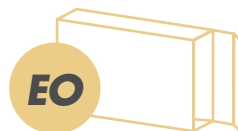

**EO-Sterilisiert**  
*EO-sterilized*



**Gebrauchsanleitung beachten**  
*Consult instructions for use*

**OSYPKA**  
Technology for an active life